

# ソマセプト と ソマレゾン の違いとその使い分け

## 安全で使いやすい

ソマセプト・ソマレゾンのマイクロコーンは、微細なので皮膚を傷つけず、安全に利用することができます。貼付することによる痛みはほとんど感じられません。

## 持続的な痛みの緩和

安全で扱い易い簡便さと、医療機器としての確実な刺激を両立させた設計のソマセプト・ソマレゾン。わずかな振動や圧迫が、マイクロコーンを振動させて刺激を送り続けます。

## 創業より培ったプラスチック加工技術で実現可能となった、刺さない鍼

マイクロコーン母体は、製品ディスクの中にあり、集合体として面を形成。これがやさしい刺激の源になっています。

※ ソマセプト・ソマレゾンは、特許取得技術（第4828166 接触鍼）により製造されています。

製品名 外観	SOMACEPT® —— ソマセプト ——	SOMARESON® —— ソマレゾン ——
材質	硬い	柔らかい (カブレにくい)
特徴	マイクロコーンが上下に200Hzで揺れる (例えると、ポイントを集中的に圧する刺激) A線維で伝わる痛みにも有効 (A線維の痛みとは、急性的・とっさの痛み)	マイクロコーンが左右に100Hzで揺れる (例えると、撫でさするような刺激) C線維で伝わる痛みにも有効 (C線維の痛みとは、慢性的・持続的な痛み)
痛みの訴え方	つきさすような痛み、激痛 ズキツとした痛み、ジンジンした痛み 痛みのポイントがはっきりしている	重苦しい、だるい、こっている 全体的に漫然とつらい
痛みの性質	強く押されたくない痛み 動かすとつらい痛み	揉みほぐすと楽になる痛み 温まると楽になる痛み
疾患	寝違え 椎間関節性腰痛 筋筋膜性腰痛(ぎっくり腰) 膝痛 肘痛 腱鞘炎 スポーツ障害 使い痛み 急性期の五十肩・神経痛 胃痛 ポイントがはっきりした腹痛	首こり 肩こり 腰こり 手足の疲れ 筋肉痛 急性期を過ぎた五十肩・神経痛
※ 個人の体質・痛みの性質は非常に多岐に渡っているため、治療の目安としてください。一方で良くならない場合は、もう一方でもお試しください。		
効能	消炎鎮痛作用 (冷湿布的) ポイント的に効果	血行をよくして痛みを緩和 (温湿布的) 広い範囲に効果が及ぶ
治療点 押してみても痛い所が 治療点になります	押したときに骨が触れやすい所 (骨に近い腱など)	押したときに骨に触れにくい所、筋肉の中心部(筋腹) ツボを使った痛み以外の治療 (冷え性や不定愁訴など東洋医学的アプローチ)
その他	スポーツ時にも使用可能 足裏への貼付も可能	スポーツ時にも使用可能 足裏への貼付も可能 予防効果があるので、痛む前の体の調整に使用可能

## 使い方


### 貼る場所

1. 痛みのある部位周辺を指で押します。
2. その中でも、より痛いとを感じる点や、気持ちいいと感じる点に貼ってください。

※ ご利用に際しては、製品の添付文書をよく読み、適切にご使用ください。

### 貼り方

#### Lタイプ Sタイプ

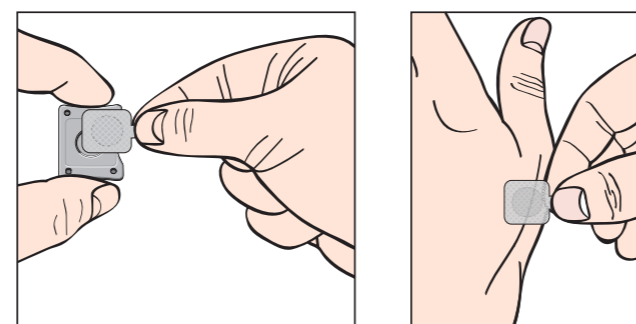

#### miniタイプ

